

BLINCON التجميل ويمكن التخلص منها العدسات اللاصقة  
تعليمات للإستخدام

اسم	اكتب	قطر الدائرة (mm)	انحناء (mm)	الديوتر وحدة قياس قوة العدسة (D)
Blincon	في المتناول مستحضرات التجميل العدسات اللاصقة	14.0 ~ 15.0	8.5 ~ 8.8	-25.00 ~ 0.00

1. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون وتجفيفها بمنشفة خالية من الوبر.
2. تحقق من موقف العدسة على القرنية .
3. باستمرار الجفن السفلي بإصبعك الأوسط.
4. استخدام السبابة إلى الشريحة العدسة إلى الجزء السفلي من العين .
5. قرصة بلطف الحافة السفلية للعدسة مع منصات من السبابة والإبهام لإزالة العدسة.
6. كرر نفس الإجراء للعين الأخرى.


يوميا تنظيف و رعاية حمية

1. بعد إزالة العدسة من العين ، وضعه على كف يدك و تطبيق بضع قطرات من محلول متعدد الأغراض على العدسة.
2. بحك العدسة بلطف مع السبابة الخاص بك ضد النخيل لمدة 20 ثانية على كلا الجانبين .
3. شطف العدسة جيدا مع الحل متعددة الأغراض
4. نقع العدسات نظيفة في الحال مع حل متعدد الأغراض للاستخدام المقبل .
5. أبدا شطف العدسة مع ماء الصنبور.

دلالة للاستخدام

عدسات Blincon المتاح التجميل الاتصال هي ل حدة البصر الصحيحة  
بالأشخاص فقدان العدسة وغير فقدان العدسة بعيون غير المريضة مع قصر  
النظر . كما يهدف لأغراض التجميل .

الجدول الزمني لارتداء اليومي / جدول استبدال الموصى بها

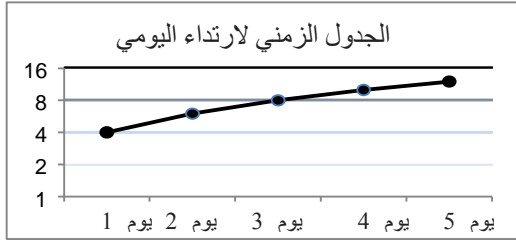

موانع / تحذيرات / احتياطات

1. لا تستخدم العدسات اللاصقة إذا كان أي من الحالات التالية :  
(a) أمراض العين أو الإصابة أو خلل يصيب القرنية والملتحمة ، أو الجفن  
(b) أي إصابة القرنية النشط ( بكتيرية أو فطرية ، الأولي أو الفيروسية )  
(c) العين الحمراء أو غضب
2. الاستخدام السليم والرعاية من العدسات اللاصقة و العناية عدسة المنتجات،  
بما في ذلك حالات عدسة ، ضرورية من أجل الاستخدام الآمن لهذه  
المنتجات .
3. إذا واجهت مشقة العين ، والإفراط في تمزيق ، طمس الرؤية، و احمرار في  
العين أو مشاكل أخرى ، يجب إزالة العدسات الخاصة بك على الفور و  
اتصل الطبيب ممارس العناية بالعيون .
4. تبقى دائما العدسة مغمورة في محلول التخزين الموصى بها عندما لا يتم  
ارتداؤها العدسات ( المخزن ) . وتحدد فترات طويلة من الجفاف يقلل من  
قدرة سطح العدسة للعودة إلى حالة رطبة .
5. اطلب من ممارس العناية بالعيون حول ارتداء العدسات أثناء النشاطات  
الرياضية .
6. وضعت على العدسات قبل وضع الماكياج. لا تحصل على مستحضرات  
التجميل والمستحضرات، و الصابون ، والكريمات، و مزيلات العرق ، أو  
الرش في العينين أو العدسات.
7. لا تشارك العدسات اللاصقة مع الآخرين .


1. دف هذه العدسات لارتداء اليومي
2. التي يمكن الاستغناء عنها و استبدالها مع عدسة جديدة كل شهر .
3. تجاهل دائما العدسات تلبس على جدول الاستبدال المتكرر بعد الجدول  
الزمني ارتداء أوصت به الممارسون العناية بالعيون الخاص بك .
4. أبدا ارتداء العدسات بعد فترة الموصى بها من قبل ممارسي العناية بالعيون  
الخاص بك .

قبل الاستخدام

- للقاية من العدوى ، يرجى اتخاذ الاحتياطات على النحو التالي :
1. تحقق من تاريخ انتهاء للعدسة قبل الشراء
  2. لا تستخدم إذا تم فتح العبوة المعقمة أو معطوب
  3. استخدام منظم مكثفة الموصى بها لغسل العدسة

عدسة التطبيق


1. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون وتجفيفها بمنشفة خالية من الوبر. شطف  
العدسة جيدا مع الحل متعددة الأغراض .
2. ضع العدسة على طرف السبابة . تأكد من أن العدسة في شكل وعاء و موجة  
بشكل صحيح .

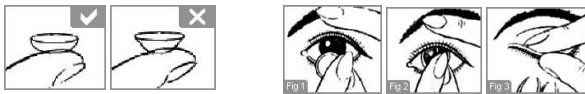

3. عقد الجفن العلوي بحزم مع إصبع واحد من ناحية أخرى . (الشكل 1)
4. أثناء الضغط باستمرار على الجفن السفلي مع إصبع واحد من ناحية تطبيق  
الخاص بك، ضع بعناية العدسات اللاصقة على قرنية . (الشكل 2)
5. ببطة الإفراج الجفن العلوي ، كذب بلطف على السماح لل عدسة المنصوص  
عليها في المكان. كرر نفس الإجراء العين الأخرى . (الشكل 3)

إزالة العدسة

رمز

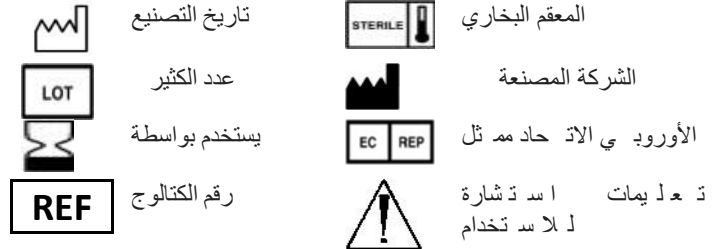

الشركة المصنعة:

**Dreamcon Co., Ltd**

10, Yeongdong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea.  
Tel: +82 (55) 381-0300 Fax: +82 (55) 366-0211

مبدأ:

**One O One Vision Creations Sdn. Bhd. (830877-A)**

2nd Floor, Sublot 11, Survey Lot 1529, Block 17,  
Jalan Lapangan Terbang, 93250 Kuching Sarawak Malaysia.  
Tel: +6 082-383 101 Fax: +6 082-383 102