


彬丰彩妆隐形眼镜 使用说明

名字	种类	直径(mm)	曲率(mm)	屈光度(D)
Blincon	丢弃性彩妆隐形眼镜	14.0 ~ 15.0	8.5 ~ 8.8	-25.00 ~ 0.00

使用指南

彬丰彩妆隐形眼镜是用于矫正无晶状体眼和非无晶状体眼人的近视。同时也可以达到美容的效果。

建议日常佩戴及更换时间表

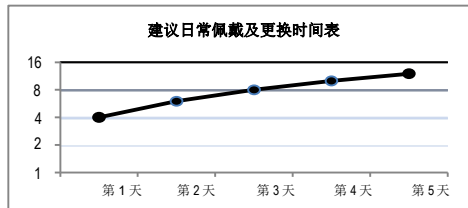

1. 此隐形眼镜用于日常佩戴。
2. 建议每月更换您的隐形眼镜。
3. 定期按照您注册视光师建议的期限更换您的隐形眼镜。
4. 不可佩戴超越您注册视光师建议的期限。


使用前

为了防止细菌感染，请采取以下预防措施：

- 购买前，请检查过期日期。
- 如果无菌包装已打开或损坏，请不要使用。
- 建议使用隐形眼药水来清洗镜片。

使用的方法

1. 佩戴隐形眼镜前，必须用肥皂彻底洗手及用干净的毛巾擦干。用多功能隐形眼药水将镜片彻底洗。
2. 请将您的镜片放在您的食指尖端。请确保镜片是在碗形并正确定向。

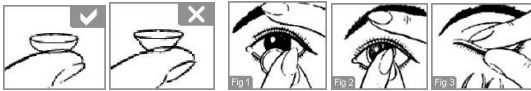

3. 用您的另一只手的一个手指按住您的上眼皮（图 1）。
4. 用您的另一个手指按住您的下眼皮，然后小心地将隐形眼镜放入眼角膜。（图 2）
5. 慢慢地释放上眼皮，轻轻地闭上眼睛，让隐形眼镜设置到位。重复同样的过程在另一只眼睛。（图 3）

摘除隐形眼镜

1. 摘除隐形眼镜前，必须用肥皂彻底洗手及用干净的毛巾擦干。
2. 检查镜片在眼角膜上的位置。
3. 用您的中指按住下眼皮。
4. 用食指去滑透镜片到眼睛的下半部分。
5. 轻轻地用食指和拇指捏住镜片，然后从眼角膜上移除。
6. 重复同样的过程在另一只眼睛。

每日清洁和镜片护理

1. 隐形眼镜摘除后，将它放在您的手掌心，滴几滴多功能隐形眼药水在镜片上。
2. 用食指轻轻地揉擦隐形眼镜左右两侧，每面大约 20 秒。
3. 然后，用多功能隐形眼药水将镜片彻底洗干净。
4. 请将镜片浸泡在多功能隐形眼药水中方便下一次使用。
5. 切勿用自来水冲洗镜片。

禁忌 / 警告 / 预防措施

1. 如果出现下列，请禁止使用隐形眼镜：
 - a) 眼部疾病、受伤或角膜受伤、结膜或眼皮的异常。
 - b) 任何角膜感染 (细菌、真菌、原虫或病毒)。
 - c) 红眼或过敏。
2. 正确使用和护理隐形眼镜的镜片和护理产品，包括储存盒是非常重要的。
3. 如果您遇到眼睛不舒服、过度流泪、视力模糊，红眼或其他问题，您应该立即摘除您的隐形眼镜及寻问您的注册视光师。
4. 隐形眼镜一定要浸泡在干净的储存盒里，长时间的干燥会影响镜片返回湿润的状态。
5. 寻问您的注册视光师如要进行任何体育活动。
6. 在化妆前需先戴上隐形眼镜。避免将化妆品、护肤液、肥皂、面霜、除臭剂或喷洒在眼睛或镜片。
7. 请勿与别人共享隐形眼镜。

符号



制造商:

Dreamcon Co., Ltd
10, Yeongdong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Tel: +82 (55) 381-0300 Fax: +82 (55) 366-0211

产品拥有者:

One O One Vision Creations Sdn. Bhd. (830877-A)
2nd Floor, Sublot 11, Survey Lot 1529, Block 17,
Jalan Lapangan Terbang, 93250Kuching Sarawak Malaysia.
Tel: +6 082-383 101 Fax: +6 082-383 102