


**BLINCON KÍNH TIẾP XÚC MỸ PHẨM DÙNG MỘT LẦN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Tên	Kiểu	Đường kính (mm)	Độ cong (mm)	Độdiop (D)
Blincon	dùng một lần Mỹ phẩm Liên Lens	14.0 ~ 15.0	8.5 ~ 8.8	-25.00 ~ 0.00

Chỉ định sử dụng

Kính áp tròng dung một lần Blincon dùng để sửa chữa độ chính xác của thị lực ở những người aphakic và không aphakic với mắt không bị cận thị. Nó cũng có thể dùng cho mục đích thẩm mỹ.

Thời gian sử dụng hàng ngày / Thời gian thay thế

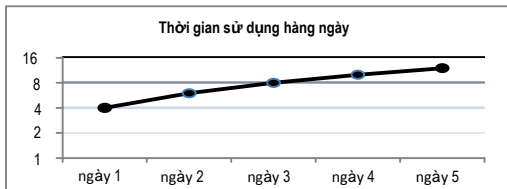

- Kính có thể dung hàng ngày.
- Nên loại bỏ và thay thế kính mới mỗi tháng.
- Luôn loại bỏ kính đã sử dụng sau một thời gian theo đơn ghi của bác sĩ mắt của bạn.
- Không sử dụng kính quá thời hạn theo đúng khuyến cáo của bác sĩ mắt của bạn.

Trước khi sử dụng

Để ngăn ngừa nhiễm trùng, hãy lưu ý như sau:

- Kiểm tra ngày hết hạn của kính trước khi mua.
- Không sử dụng nếu bao bì đã bị mở hoặc bị hư hại.
- Sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng được giới thiệu để vệ sinh kính.

Sử dụng kính (mang kính vào mắt)

- Rửa tay sạch bằng xà phòng và lau khô bằng khăn lau không để lại sợi vải. Rửa sạch kính với dung dịch đa mục đích.
- Đặt kính lên đầu ngón tay trở của bạn. Bảo đảm rằng kính có hình cái chén và đúng hướng.



- Dùng tay còn lại giữ chắc mí mắt trên (hình 1).
- Kéo mí mắt dưới với tay đang giữ kính, cẩn thận đặt kính vào trong mắt (hình 2).
- Chạm rãi thả mí mắt trên xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt để kính vào đúng vị trí. Làm tương tự với mắt còn lại (hình 3).

Tháo kính khỏi mắt

- Rửa tay sạch bằng xà phòng và lau khô bằng khăn lau không để lại sợi vải.
- Kiểm tra vị trí của kính trên mắt.
- Kéo mí mắt dưới xuống bằng ngón giữa.
- Dùng ngón trở kéo kính xuống phần phía dưới của mắt.

- Nhẹ nhàng kẹp cận dưới của kính bằng ngón trở và ngón cái để tháo kính ra khỏi mắt.
- Làm tương tự với mắt còn lại.

Phác đồ vệ sinh và bảo quản hàng ngày

- Sau khi tháo kính khỏi mắt, đặt kính trong lòng bàn tay và nhỏ vài giọt dung dịch đa mục đích lên kính.
- Chà xát kính nhẹ nhàng bằng ngón trở cả 2 bên trong khoảng 20 giây.
- Rửa sạch kính bằng dung dịch đa mục đích.
- Ngâm kính sau khi rửa sạch trong hộp với dung dịch đa mục đích cho lần sử dụng tiếp theo.
- Không rửa kính bằng nước máy.

Chống chỉ định / Cảnh báo / Phòng ngừa

- Không sử dụng kính áp tròng trong các điều kiện sau đây :
 - bệnh về mắt, chấn thương hoặc bất thường ảnh hưởng đến mô mắt, kết mạc, hoặc mí mắt
 - Đang bị nhiễm trùng giác mạc (do vi khuẩn, nấm, đơn bào hay virus)
 - Mắt đỏ hoặc bị kích thích
- Sử dụng và bảo quản đúng cách kính áp tròng và các sản phẩm bảo vệ kính, bao gồm cả hộp đựng kính là việc quan trọng để sử dụng an toàn.
- Nếu bạn cảm thấy khó chịu về mắt, chảy nước mắt nhiều, mắt bị mờ khi nhìn, mắt đỏ hay các vấn đề khác, hãy ngưng sử dụng kính.
- Luôn giữ kính ngập trong dung dịch bảo quản khi không sử dụng. Để kính bị khô trong thời gian dài sẽ làm giảm khả năng của kính khi trở lại trạng thái ẩm.
- Nên hỏi bác sĩ mắt của bạn về việc sử dụng kính khi tham gia các hoạt động thể thao.
- Hãy mang kính trước khi trang điểm. Tránh để mỹ phẩm, kem dưỡng da, xà phòng, kem, chất khử mùi dính vào hay bị xịt lên mắt hoặc kính.
- Không dùng chung kính áp tròng với người khác.

Biểu tượng

	Ngày sản xuất		hơi nước tiệt trùng
	Số lô		Nhà sản xuất
	Sử dụng bởi		đại diện EU
	số Danh mục		tham khảo hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Dreamcon Co., Ltd
10, Yeongdong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Tel: +82 (55) 381-0300 Fax: +82 (55) 366-0211

nguyên tắc:

One O One Vision Creations Sdn. Bhd. (830877-A)
2nd Floor, Sublot 11, Survey Lot 1529, Block 17,
Jalan Lapangan Terbang, 93250 Kuching Sarawak Malaysia.
Tel: +6 082-383 101 Fax: +6 082-383 102