

**LENTE DE CONTACTO SUAVE ESTÉRIL**


INSTRUCCIONES DE USO

Tipo	diámetro	Curvatura (mm)	Dioptría (D)
Lente de contacto suave estéril	14.0 ~ 15.0	8.5 ~ 8.8	-25.00 ~ 0.00

Indicaciones de uso

Lente de contacto suave estéril están indicadas para corregir la agudeza visual en personas afáquicas y no afáquicas, con ojos sanos y miopía. También pueden ser usadas con fines cosméticos.

Horario de uso diario / calendario de sustitución recomendado

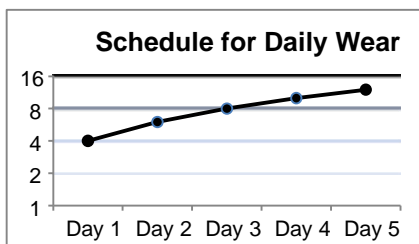

- Las lentes están diseñadas para el uso diario.
- Deben ser desechadas y reemplazadas por nuevas lentes cada mes.
- Deseche siempre las lentes siguiendo el calendario de uso recomendado por su oculista.
- No use nunca las lentes por más tiempo del período recomendado por su oculista.

Antes de usar

Para prevenir infecciones, por favor, tomar las siguientes precauciones:

- Compruebe la fecha de caducidad de la lente antes de la compra
- No utilizar si el envase estéril está abierto o dañado.
- Use un líquido intensivo especializado para la limpieza de las lentes.

Aplicación de las lentes

- Lávese bien las manos con jabón secándolas con una toalla sin pelusa. Aclare la lente de forma exhaustiva con solución multiuso. Coloque la lente en la punta de su dedo índice. Asegúrese de que la lente tiene una forma de tazón y orientada correctamente .



- Mantenga el párpado superior firmemente con un dedo de la otra mano. (Figura 1)
- Mientras sujeta el párpado inferior con un dedo de la mano que sostiene la lente, colóquela cuidadosamente en la córnea. (Figura 2)
- Libere lentamente el párpado superior, y cierre los ojos con suavidad para que la lente se acomode correctamente. Repita el mismo procedimiento para el otro ojo. (Figura 3 )



La eliminación de la lente

- Lávese bien las manos con jabón secándolas con una toalla sin pelusa.
- Compruebe la posición de la lente en la córnea.
- Mantenga el párpado inferior presionado con el dedo medio.
- Utilice el dedo índice para deslizar la lente hacia la parte inferior del ojo.

- Retire la lente pellizcando cuidadosamente su borde inferior con las yemas del dedo índice y pulgar.
- Repita el mismo procedimiento para el otro ojo.

Limpieza diaria y cuidados

- Después de quitar la lente del ojo, colóquela en la palma de la mano y aplique algunas gotas de solución multiuso.
- Frote la lente suavemente con el dedo índice en la palma de la mano durante unos 20 segundos en ambos lados.
- Enjuague la lente a fondo con solución multiuso.
- Guarde las lentes en su caja sumergidas en solución multiuso hasta su próxima utilización.
- Nunca enjuagar las lentes con agua del grifo.

Contraindicaciones / Advertencias / precauciones

- No utilice las lentes de contacto si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
  - Enfermedad ocular, lesión o anomalía que afecta a la córnea , conjuntiva , o párpados
  - Cualquier infección corneal activa (bacteriana, fúngica, protozoaria o viral)
  - Ojos rojos o irritados
- El uso y cuidado de lentes de contacto y accesorios de mantenimiento, incluyendo su caja, son esenciales para el uso seguro de estos productos.
- Si experimenta molestias en los ojos, lagrimeo excesivo, visión borrosa, enrojecimiento de los ojos u otros problemas, quítese de inmediato las lentes de inmediato y consulte a su oculista.
- Mantenga siempre sus lentes sumergidas en una solución de almacenamiento recomendada cuando no se están utilizando. Si se dejan secar, la superficie de la lente perderá capacidad de volver a humedecerse.
- Pregúntele a su oculista sobre la utilización de lentes durante las actividades deportivas.
- Póngase las lentes antes de utilizar maquillaje. No permita que los ojos o lentes entren en contacto con productos de maquillaje, lociones, jabones, cremas, desodorantes o aerosoles.
- No comparta las lentes de contacto con los terceros personas.

Duración de uso: hasta 3 meses

Símbolo

	Fecha de fabricación		Esterilizado con vapor
	Número de lote		Fabricante
	Utilizar antes de		representante en la UE
	Numero de catalogo		Consulte las instrucciones de uso

**Manufacturer & EU Representative** Fabricante y representante en la UE

Fabricante

**Dreamcon Co., Ltd**

#8, 10, Yeongdong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea.

Representante autorizado: **One O One Vision Creations Sdn. Bhd. (830877-A)**  
Blincon Building, 2nd Floor, Sublot 11, Survey Lot 1529, Block 17, Jalan Lapangan Terbang, 93550 Kuching Sarawak Malaysia.