


**BLINCON COSMETIC JETABLE CONTACT LENS  
MODE D'EMPLOI**

Prénom	Le Type	Diamètre (mm)	Courbure (mm)	Dioptrie (D)
Blincon	Jetable Cosmétique Contact Lens	14.0 ~ 15.0	8.5 ~ 8.8	-25.00 ~ 0.00

**Indications d'utilisation**

Lentilles Blincon jetables Cosmétique contact est pour l'acuité visuelle correcte des personnes aphaques et non aphaques aux yeux non malades atteints de myopie. Il est également destiné à des fins cosmétiques.

**Calendrier de Wear Daily / Calendrier de Remplacement Recommandé**

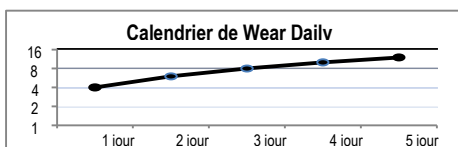

1. Les lentilles sont destinés à un usage quotidien.
2. Pour être mis au rebut et remplacé par un nouveau verre chaque mois.
3. Toujours jeter les verres portés sur un calendrier de remplacement fréquent après l'horaire de port recommandé par vos praticiens de soins oculaires.
4. Ne portez jamais vos lentilles au-delà de la période recommandée par vos praticiens de soins oculaires.

**Avant Utilisation**

Pour prévenir l'infection, prenez s'il vous plaît précautions comme suit:

1. Vérifiez la date expirée de la lentille avant d'acheter
2. Ne pas utiliser si l'emballage stérile est ouvert ou endommagé
3. Utilisez nettoyant intensif recommandé de se laver les lentilles

**Objectif Application**

1. Se laver les mains soigneusement avec du savon et les sécher avec une serviette non pelucheuse. Rincez la lentille à fond avec une solution multi-usagers.
2. Placez la lentille sur le bout de votre index. Assurez-vous que la lentille est en forme de bol et correctement orienté.



3. Tenir la paupière supérieure fermement avec un doigt de l'autre main (Figure 1).
4. Tout en maintenant la paupière inférieure avec un doigt de votre main application, placer soigneusement la lentille de contact sur la cornée (Figure 2).
5. Relâchez doucement la paupière supérieure, fermer doucement les yeux pour laisser la lentille mis en place . Répétez cette procédure pour l'autre œil (Figure 3).

**Retrait de l'objectif**

1. Se laver les mains soigneusement avec du savon et sécher avec une serviette non pelucheuse.
2. Vérifiez la position de la lentille sur la cornée.

3. Maintenez la paupière inférieure avec le doigt du milieu.
4. Utilisez l'index pour faire glisser la lentille à la partie inférieure de l'œil.
5. Pincez doucement le bord inférieur de la lentille avec les plots de l'index et le pouce pour enlever les lentilles.
6. Répétez la même procédure pour l'autre œil.

**Nettoyage quotidien ET des Soins Régiment**

1. Après avoir enlevé la lentille de l'œil, placez-le sur la paume de votre main et appliquez quelques gouttes d'une solution polyvalente sur la lentille.
2. Frottez délicatement l'objectif avec votre index contre la paume pendant environ 20 secondes sur les deux côtés.
3. Rincez la lentille à fond avec une solution multi-usagers.
4. Faire tremper la lentille propre dans le cas d'une solution multi-usagers pour la prochaine utilisation.
5. Ne jamais rincer la lentille avec de l'eau du robinet.

**Contre-indications / Avertissements / Précautions**

1. Ne pas utiliser la lentille de contact, si l'une des conditions suivantes sont réunies:
  - a Maladie des yeux, des blessures ou une anomalie qui affecte la cornée, de la conjonctive, ou de la paupière
  - b Toute infection cornéenne active (bactérienne, fongique, protozoaire ou virale)
  - c Yeux rouges ou irrités
2. L'utilisation et l'entretien de lentilles de contact et de soins de lentille produits, y compris les cas de lentilles appropriée, sont essentiels pour l'utilisation sécuritaire de ces produits.
3. Si vous ressentez une gêne oculaire, larmolement excessif, vision flou, rougeur de l'œil ou d'autres problèmes, vous devez retirer vos lentilles immédiatement et contactez votre Eye Care Practitioner.
4. Gardez toujours votre objectif immergé dans une solution de stockage recommandé lorsque les lentilles ne sont pas portés (stockées). Des périodes prolongées de séchage réduisent la capacité de la surface de l'objectif de revenir à un état humide.
5. Demandez à votre Eye Care Praticien de porter des lentilles lors d'activités sportives.
6. Mettez les lentilles avant de mettre sur le maquillage. Ne pas obtenir les cosmétiques, les lotions, savons, crèmes, déodorants, ou sprays dans les yeux ou les lentilles.
7. Ne pas partager les lentilles de contact avec les autres.

**Symbole**

	Date de fabrication		stérilisées à la vapeur
	Numéro de lot		Fabricant
	Utiliser par		Représentant de l'UE
	Numéro de catalogue		Consultez instructions d'utilisation

**Fabricant:**

**Dreamcon Co., Ltd**  
10, Yeongdong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea.  
Tel: +82 (55) 381-0300 Fax: +82 (55) 366-0211

**Principe:**

**One O One Vision Creations Sdn. Bhd. (830877-A)**  
2nd Floor, Sublot 11, Survey Lot 1529, Block 17,  
Jalan Lapangan Terbang, 93250 Kuching Sarawak Malaysia.  
Tel: +6 082-383 101 Fax: +6 082-383 102