


**BLINCON 使い捨て美容コンタクトレンズ
使用説明書**

名称	タイプ	直径 (mm)	曲率 (mm)	度数 (D)
Blincon	使い捨て美容コンタクトレンズ	14.0~15.0	8.5~8.8	-25.00~0.00

使用方法

Blincon 使い捨て美容コンタクトレンズは、健康な近視である無水晶体症及び水晶体症の目に正しい視力を与えることを目的としたものです。また美容の目的としても使用できます。

毎日の装着/交換の目安について

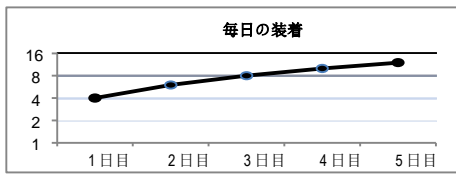

1. レンズは日常の装着用です。
2. 一か月経ったら、新しいレンズに交換してください。
3. 専門医により交換の頻度についての指示があった場合には、それに従ってください。
4. 専門医から指示された期間を超えてのレンズの装着はおやめください。


ご使用前に

感染を防ぐために、次のような予防措置を講じてください。

1. 購入する前にレンズの有効期限を確認してください。
2. 滅菌パッケージが開かれたり、破損した場合は、使用しないでください。
3. レンズを洗浄する際には、指定の集中洗浄溶液をご使用ください。

レンズの装着方法

1. 石鹸で手をよく洗い、糸くずの出ないタオルでしっかりと拭きます。レンズを、多目的溶液で十分にすすぎます。
2. 人差し指の先端にレンズを置きます。レンズは碗状であり、正しい向きであることを確認してください。

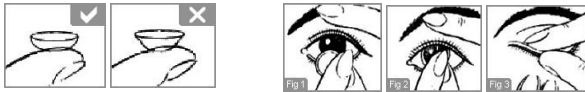

3. 反対の手の指一本でしっかりと上まぶたを持ち上げます (図1)
4. コンタクトを持っている手の指一本で下瞼を下に抑えながら、
5. 慎重に角膜の上にコンタクトレンズを載せます。(図2)
6. 上瞼をゆっくりと離したら、静かに目を閉じて、レンズが所定の位置にくるようにします。もう片方の目にも同じ作業を繰り返します。(図3)

レンズ除去

1. 石鹸で手をよく洗い、糸くずの出ないタオルで拭きます。
2. 角膜上のレンズ位置を確認してください。
3. 中指で下まぶたをおさえておきます。
4. 人差し指でレンズが目の下の部分にくるように動かします。

5. 人差し指と親指の腹側でレンズの下端をつまんで、取り出します。
6. もう片方の目にも同じ作業を繰り返します。

毎日のクリーニングとケア方法

1. 目からレンズを取り出したら、手のひらの上に置き、レンズに多目的溶液を数滴たらしめます。
2. 約 20 秒間手のひらの上で人差し指を使って軽くレンズをこすって洗浄します。
3. 多目的溶液で十分にレンズをすすぎます。
4. 次の使用まで清潔なレンズを多目的溶液で満たされたケースで保管します。
5. 水道水ではレンズをすすがないでください。

禁忌 / 警告 / 注意事項

1. 次の条件のいずれかの場合には、コンタクトレンズを使用しないでください:
 - a) 角膜、結膜、または瞼に影響を与える眼疾患、傷害または異常
 - b) アクティブな角膜感染症 (細菌、真菌、原虫またはウイルス)
 - c) 目の赤みや炎症がある場合
2. 製品の安全な使用のために、必ずコンタクトレンズとケースを含むレンズケア製品を適切に使用及びケアしてください。
3. 目の不快感、過度の流涙、視力ぼやけ、目の充血、等の問題が生じたら、すぐにレンズを外し、眼科に相談してください。
4. レンズを着用しない場合には、必ず、推奨される保存液に浸した状態にしてください。レンズの乾燥が続くとレンズの表面が湿った状態に戻りにくくなります。
5. スポーツの際のレンズ装着については、眼科医にご相談ください。
6. 化粧の前にレンズを装着ください。また目やレンズに化粧品、ローション、石鹸、クリーム、デオドラント、スプレーなどが入らないようにしてください。
7. 他の人とコンタクトレンズを共有しないでください。

シンボル

	製造年月日		蒸気滅菌
	整理番号		メーカー
	によって使用		EU 代表
	カタログ番号		使用説明書を参照してください

メーカー:

Dreamcon Co., Ltd
10, Yeongdong 2-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Tel: +82 (55) 381-0300 Fax: +82 (55) 366-0211

頭株:

One O One Vision Creations Sdn. Bhd. (830877-A)
2nd Floor, Sublot 11, Survey Lot 1529, Block 17,
Jalan Lapangan Terbang, 93250Kuching Sarawak Malaysia.
Tel: +6 082-383 101 Fax: +6 082-383 102